



แคตตาล็อกทั่วไป

V.02.24

MAGAPOR



Just for pigs

มากกว่า 35 ปีในการนำเสนอโซลูชันที่เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติและ
สร้างสรรค์สำหรับการผสมเทียมในสุกร

จิตวิญญาณแห่งความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมของเราได้ขับเคลื่อนแผนวิจัยและพัฒนา เรามีสหสาขาวิชาชีพซึ่งประกอบไปด้วยนักชีวเคมี, สัตวแพทย์,
วิศวกรและนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่ทำงานเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเรา รวมทั้งการออกแบบและพัฒนาโซลูชันใหม่ๆ สำหรับภาคส่วนของเรา

จุดเด่นของเราก่อตั้งขึ้นจากคุณลักษณะและมุมมองสำคัญสามประการของปรัชญาของบริษัท :

- ผู้เชี่ยวชาญด้านการขยายพันธุ์ของสุกร
- ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนใคร
- บริการด้านเทคนิคโดยมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของลูกค้



แคตตาล็อกขององค์กร Magapor ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขแคตตาล็อกนี้ สงวนสิทธิ์ทุกประการ

© Magapor, S.L. ผลิตภัณฑ์ บริการและข้อมูลในเอกสารนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงและ/หรือแตกต่างไปข้อความและรูปภาพที่แสดงไว้

Magapor

ผู้เชี่ยวชาญด้านการขยายพันธุ์ของ
สุกร

ความทุ่มเทของ Magapor ในการทำฟาร์มสุกร
ทำให้เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานของเรา

R&D (งานวิจัยและพัฒนา)

ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นเอกลักษณ์
และพิเศษเฉพาะ

การวิจัยและพัฒนาเป็นหนึ่งในเสาหลักพื้นฐานของ
Magapor ซึ่งช่วยให้เราสามารถแนะนำโซลูชันที่ใช้ได้
จริงให้กับตลาด

ความทุ่มเท

บริการด้านเทคนิคสำหรับลูกค้าของ
เรา

การสนับสนุนลูกค้าอย่างต่อเนื่องและความ
มุ่งมั่นของเราในการถ่ายทอดความรู้ไปยัง
ภาคส่วนเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เราเป็น

เทคโนโลยี

อุปกรณ์แบบสมาร์ทพร้อมการตรวจสอบ
ย้อนกลับ

วิศวกรรมและโปรแกรมเมอร์ของเราพัฒนา
อุปกรณ์ทั้งหมดภายใต้ความเรียบง่ายและตรวจสอบ
ย้อนกลับได้ในการใช้งาน

ความไว้วางใจ

การควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดของเรา

เราวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเราในการ
ผลิตส่วนขยายการควบคุม RTC (การควบคุมสาร
พิษต่อระบบสืบพันธุ์) ในพลาสติกใสในรูปหรือการ
ควบคุมการสืบพันธุ์ทางชีวภาพ

ความปลอดภัย


เราทำงานโดยใช้โปรโตคอลความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ

กระบวนการผลิตทั้งหมดของเราดำเนินการภายใต้
ระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ เช่น การ
ซ้อมแซบ ซึ่งดำเนินการในโรงงานอื่นที่ไม่ใช่โรงงานหลัก

GESIPOR 360

ซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการการผลิตปริมาณน้ำเชื้อแบบครบวงจร

ความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับโดยรวมในการผลิตน้ำเชื้อ

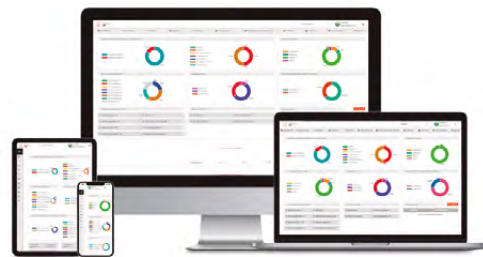

สุกรตัวผู้



การวิเคราะห์



การแจ้งข่าวสารละลาย



บรรจุภัณฑ์



การติดตาม



การวางแผน



พัสดุศาสตร์



ผู้ปฏิบัติงาน

+ โมดูลการวิเคราะห์



รายงานเฉพาะตัวบุคคล
รายงานของศูนย์
ผลผลิต
การตรวจสอบสารสกัด



+ โมดูลการติดตาม




แผนสุขภาพ
ความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ
การเยี่ยมชม
คลังสินค้า



+ โมดูลคำสั่งซื้อ



คำสั่งซื้อ
หมายเหตุการจัดส่ง
สต็อก
ข้อมูลการขนส่ง

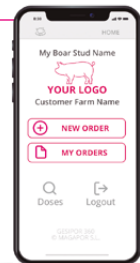

> ปรับให้ทันกับความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้สามารถควบคุมตัวแปรในการผลิตของพ่อพันธุ์สุกรทั้งหมดได้

- การคาดการณ์และกำหนดเวลาการสกัด
- กำหนดมาตรฐานและบันทึกกระบวนการผลิต (การวิเคราะห์, การแจ้งข่าวสารละลาย, บรรจุภัณฑ์)
- จัดการคำสั่งซื้อและหมายเหตุในการจัดส่ง
- ช่วยให้ผู้สามารถตรวจสอบย้อนกลับการผลิตปริมาณได้อย่างสมบูรณ์
- เผื่อติดตามและควบคุมแผนสุขภาพของพ่อพันธุ์สุกร
- เสนอข้อมูลทั้งหมดผ่านรายงานที่จัดทำเฉพาะ

ลักษณะเฉพาะ:

- ผู้ใช้หลายคนและหลายศูนย์
- การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ (อุปกรณ์ชิ้นงาน Magapor Integrated System)
- โหมดออนไลน์และออฟไลน์

ข้อดี:

- เสริมสร้างข้อผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์
- ใช้งานง่าย
- การพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยแผนกไอทีและวิจัยและพัฒนาของเรา

 PRACTICAL INNOVATION

ใช้งานง่าย,
ช่วยให้คุณ
จัดการการผลิต
และตรวจสอบ
ข้อมูลได้อย่างเต็ม
ที่ในทุกที่ทุกเวลา
ไม่ว่าคุณจะอยู่
ที่ไหน

ระบบ วิชาการของ MAGAPOR



ระบบอัตโนมัติทั้งหมด: การตั้งเวลา + การรวบรวม + การวิเคราะห์ + การเจือจาง + บรรจุภัณฑ์



Gesipor ช่วยให้สามารถรวมกระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเข้ากันได้โดยอัตโนมัติด้วยการตรวจสอบย้อนกลับที่ถูกต้อง ตั้งแต่การรวบรวมจนกระทั่งไปยังฟาร์ม โดยใช้แนวคิดการทำงานของ Magapor Integrated System

กระแสน้ำไหลได้รับการดูแลและการผ่านซอฟต์แวร์ Gesipor เพื่อการควบคุมและวิเคราะห์ผลลัพธ์อย่างสมบูรณ์



เครื่องพิมพ์ ZEBRA

เครื่องพิมพ์ความร้อนเพื่อเชื่อมโยงกับ Gesipor



เครื่องชั่ง Gesipor

ปริมาณการหาล้างอัตโนมัติ



ฉลากที่ตัดไว้เรียบร้อยแล้ว



เครื่องอ่านบาร์โค้ด

ป้อนข้อมูลอัตโนมัติใน Gesipor

ERGOS

การเก็บรวบรวมดื่ม

 ความสะดวกสบาย, ความทนทาน
และสุนทรมัยระหว่างการเก็บ



CE

 50 Kg
95 x 65 x 45 cm

 53 Kg
100 x 34 x 60 cm

- ออกประสงค์ สำหรับการรวบรวมด้วยตนเอง และการรวบรวมอัตโนมัติด้วย Autocollect
- การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ สะดวกสบาย และปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งาน, ยึดติดกับพื้น


- เพื่อการรองรับกับหลอดหยดยังขึ้น
- มีความทนทาน, ทำความสะอาดง่ายและรวดเร็ว: สร้างจากสแตนเลสสตีล
- เหมาะสำหรับสุกรตัวผู้ใด ๆ ปรับความสูงได้

การเลือกใช้อุปกรณ์เสริม



ERGOS GUARD

ตัวป้องกันสแตนเลสสตีลเพื่อป้องกัน Autocollect จากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

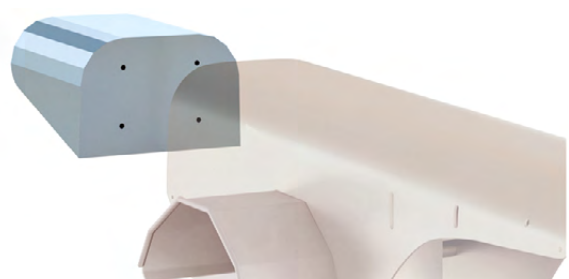

ERGOS EXTENSION

สารละลายที่เจือจางน้ำเชื้อสำหรับสุกรตัวผู้ที่มีขนาดใหญ่ สร้างจากสแตนเลส

ERGOS RCA

การเก็บรวบรวมหุ่นจำลองด้วยระบบไฮดรอลิก

ลดระยะเวลาและการบาดเจ็บ



CE

50 Kg
95 x 65 x 45 cm

53 Kg
100 x 34 x 60 cm

- การเพิ่มประสิทธิภาพต้นเวลา: มีส่วนช่วยในการปรับตัวของหนูป่าตัวผู้ให้เข้ากับหุ่นจำลองและลดระยะเวลาการติดตั้ง
- การบาดเจ็บน้อยลง: ลดจำนวนหนูป่าตัวผู้ที่มีปัญหา มีความทนทาน, ทำความสะอาดง่ายและ

- รวดเร็ว: สร้างจากสแตนเลสสตีล
- ผลผลิตเพิ่มขึ้น: ปรับปรุงคุณภาพและปริมาณการหลัง เนื่องจากตำแหน่งของหนูป่าตัวผู้
- การฝึกและการเรียนรู้ที่ได้รับการปรับปรุง: หนูป่าตัวผู้สามารถเรียนรู้ได้โดยตรงเกี่ยวกับหุ่นจำลอง

- การผลิต
- ด้วยประโยชน์เช่นเดียวกับของหุ่นจำลอง Ergos



AUTOCOLLECT

ระบบสำหรับรวบรวมการหลั่งน้ำเชื้อ
อัตโนมัติ



เพิ่มปริมาณการผลิต
น้ำเชื้อต่อสุกรตัวผู้ได้
ถึง 40%

ประกอบด้วยคู่มือการเคลื่อนย้ายซึ่งสามารถติดตั้งภายในคัมบี้ Ergos และ
อุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อติด Autocollect Cervix และกระตุ้นอุนหนูบี

- มีตำแหน่งการเคลื่อนย้ายที่คงที่หรือเป็นอิสระสำหรับสัตว์
- สุกรตัวผู้จะหลั่งออกมาหลังจากการหลั่งน้ำเชื้อ
- ตำแหน่งจะช่วยให้ป้องกันการกระตุ้นอุนหนูบีที่เก็บรวบรวมจากการหลั่งของสุกรตัวผู้



> ข้อดีของคัมบี้ Ergos + Autocollect

- เพิ่มปริมาณการผลิตน้ำเชื้อต่อสุกรตัวผู้ได้ถึง 40%
- ช่วยให้ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมจากสุกรตัวผู้ได้สองตัวในเวลาเดียวกัน
- ลดความแปรปรวนของผลลัพธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ทำให้กระบวนการรวบรวมมีมาตรฐาน
- เหมาะสำหรับทุกสายพันธุ์และทุกสถานที่
- อำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน
- ถูกสุขอนามัย: ลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนของแบคทีเรียในการหลั่งน้ำเชื้อ
- ทำมาจากสแตนเลส



300 หน่วย/กล่อง
1 Kg
35 x 23 x 25 cm

AUTOCOLLECT CERVIX

ความสะดวกสบายและสุขอนามัย

- ใช้อัตโนมัติ, ช่วยป้องกันและป้องกันการบาดเจ็บของอุนหนูบีของสุกรตัวผู้, ช่วยให้ติดตั้งได้อย่างพอดีและเพิ่มการกระตุ้น
- ป้องกันการปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้นโดยการปรับปรุงสุขอนามัยระหว่างการเก็บ



› ERGOS MOBILITY

หุ่นตัวมีล้อเคลื่อนย้ายได้

- พนย้ายสะดวก
- สะดวกสบายสำหรับสุกรตัวผู้
- แข็งแรงสร้างจากสแตนเลสสตีล
- ถูกสุขอนามัยทำความสะอาดง่าย



19 Kg
80 x 40 x 55 cm

21 Kg
95 x 50 x 60 cm



เสื้อกันสั่น

15 Kg
100 x 150 x 2 cm

กระติกเก็บอุณหภูมิสำหรับเก็บน้ำเชื้อ



FILTERBAG

50 ซีน/แพ็ค



แผ่นกระจก ฟิลเตอร์

200 หนวย/กล่อง

Ø240 mm



GSP READER (เครื่องอ่าน GSP)
ระบุตัวผู้ปฏิบัติงานและสุกรตัวผู้ได้ทันที




เครื่องพิมพ์ GSP
เครื่องพิมพ์ความร้อนแบบสุญญากาศ



พวงกุญแจ GSP
สำหรับการระบุตัวผู้ปฏิบัติงาน



แท็ก GSP
สำหรับระบุตัวสุกรตัวผู้

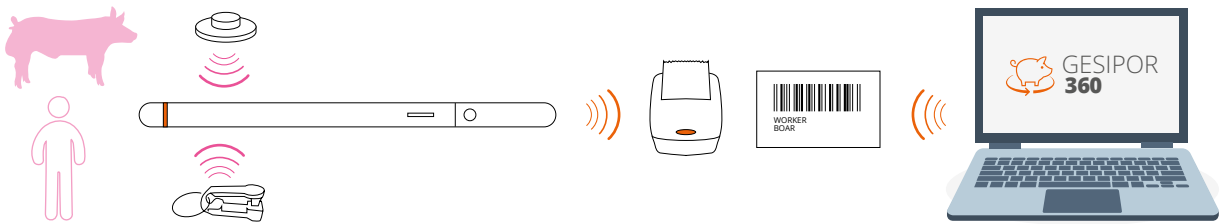

MAGAVISION

ระบบ CASA สำหรับการประเมินคุณภาพน้ำเชื้อที่รวดเร็วและแม่นยำด้วยซอฟต์แวร์การเรียนรู้ของเครื่อง



รวดเร็ว,
ง่ายดายและแม่นยำ



MAGAVISION
tech

MAGAVISION
prem

MAGAVISION
elite



ระบบ
รวมการของ
MAGAPOR

21 Kg
61 x 43 x 55 cm

- > ระบบ CASA สำหรับการประเมินคุณภาพน้ำเชื้อด้วยเครื่องมือการเรียนรู้ของเครื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับน้ำเชื้อหนูป่าตัวผู้ พร้อมวางจำหน่ายด้วยกัน 3 รุ่น (**tech, prem y elite**) เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการทุกรูปแบบ ช่วยให้สามารถวิเคราะห์พารามิเตอร์คุณภาพน้ำเชื้อหลักได้อย่างมีวัตถุประสงค์และเป็นมาตรฐาน:
- การเคลื่อนไหวแบบก้าวหน้าที่ครอบคลุมทั้งหมด
 - ความเข้มข้น

- รูปแบบที่ผิดปกติ (ทั้งหมดหรือแยกขึ้นอยู่กับรุ่น)
- พารามิเตอร์จลน์ (ขึ้นอยู่กับรุ่น)
- การจำแนกอีกกลุ่มต้นชั้น

การวิเคราะห์การสั่นที่สมบูรณ์:

- เป็นจริงและแม่นยำ
- การวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว
- ระบุจำนวนโคส
- กล้องจริง 5 เมกะพิกเซล

- วิเคราะห์วิดีโอ 1 วินาทีที่ 60 fps/m
- บันทึกภาพถ่ายและวิดีโออัตโนมัติ
- ผู้ใช้ประเภทต่าง ๆ
- ข้อมูลทั้งหมดสามารถเก็บถาวรได้ในฐานข้อมูล Gesipor

SMART STAGE


แสดงความเร็วสูงที่ทำงานด้วยมอเตอร์แบบมีการให้ความร้อนและการไฟฟ้สอัตโนมัติสำหรับ Magavision

- ช่วยให้สามารถติดตามและวิเคราะห์ได้หลายครั้งสูงสุดที่โดสและการหลัง 20 ครั้ง
- วิเคราะห์ตัวอย่าง 20 ตัวอย่างในเวลาไม่เกิน 5 นาที.
- ปรับเวลาไฟฟ้สอัตโนมัติให้เหมาะสม



MAGAVISION ONE

ระบบ CASA สำหรับการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเชื้อ

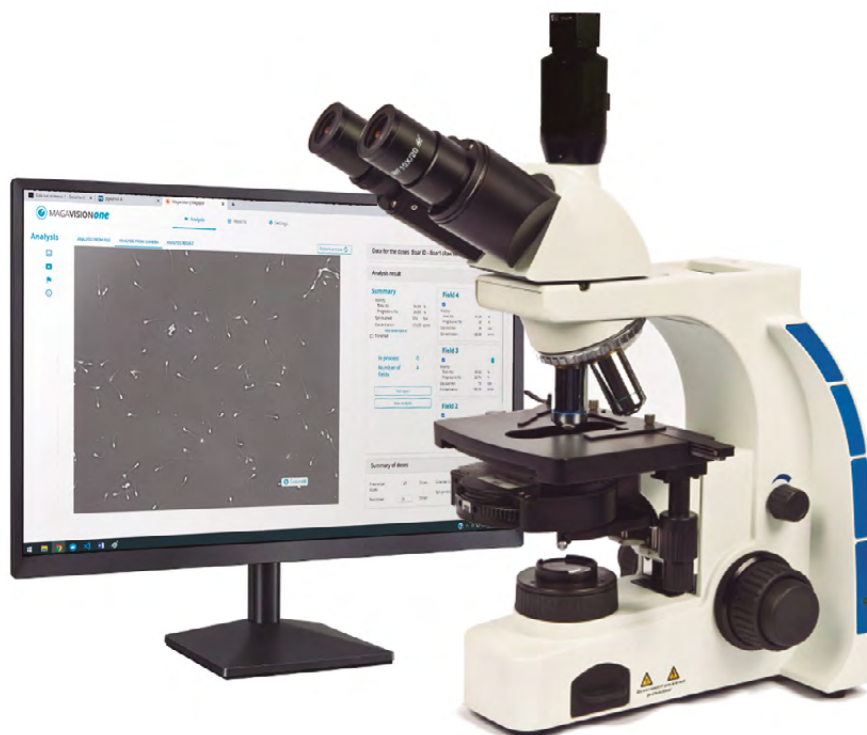

MAGAVISION
one



ระบบ
วิเคราะห์ของ
MAGAPOR

- > ระบบ CASA A ที่ง่ายกว่า สำหรับการวิเคราะห์พารามิเตอร์คุณภาพน้ำเชื้อหลักที่รวดเร็วและแม่นยำ:
- การเคลื่อนไหวแบบตัวหนักที่ครอบคลุมทั้งหมด
 - ความแม่นยำ
 - การจำแนกแอ็กทิวิตีชั้น

การวิเคราะห์การหลังแบบเต็มรูปแบบและอย่างง่าย:

- เป็นจริงและแน่นอน
- การวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว
- ระบุจำนวนโคส
- วิเคราะห์วิดีโอ 0.5 วินาทีที่ 30 เฟรม
- กล้องจริง 1 เมกะพิกเซล

- อนุญาตให้ส่งออกข้อมูลในรูปแบบ Excel

Magavision One เป็นระบบ CASA ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเริ่มต้นการวิเคราะห์ที่มาตรฐาน



ห้องนับจำนวน
5 การวิเคราะห์ต่อห้อง

25 หน่วย

ไมโครปีเปต
0.5 ไมโครลิตร ถึง 10 ไมโครลิตร

MAGASLIDE

แผ่นเพลทร้อน



- ติดตั้งตัวควบคุม PID ที่นำเสนอการควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำมาก และให้ความร้อนที่ละเอียด ได้ดีขึ้น ในขณะทำการสั่นไหว
- ตัวควบคุมที่แม่นยำขนาด 0.1°C.
- สร้างจากสเตนเลส
- การกระจายของอุณหภูมิที่เท่ากันทั่วพื้นผิวทั้งหมดของแผ่นเพลท

5.3 Kg
50 x 40 x 15 cm

4.5 Kg
31 x 26 x 6,5 cm



MAGACELL

เครื่องวัดเคซี



การคำนวณปริมาณน้ำเชื้อ

- การอ่านค่าการดูดซับกันที่หรือข้อมูลของปริมาณโดยตรง
- เครื่องอ่านดิจิทัล LCD ความคมชัดสูง
- ความเร็วและความแม่นยำในการคำนวณจำนวนโคส

3 Kg
29 x 31 x 19 cm

ถ้วยรอง

ถ้วยรองแบ่งสี่เหลี่ยมมาตรฐาน

ไม้วาสและโปร่งใส่ภายใต้แสงอัลตราไวโอเลต

100 หน่วย/กล่อง



กล้องจุลทรรศน์

ตามหลักสรีรศาสตร์มีความแข็งแรงสูงและมีเสถียรภาพพร้อมการควบคุม
แกนทั้งสองด้านสำหรับการโฟกัสแบบมาโครและไมโครเมตร



M03 กล้องจุลทรรศน์สามกระบอกตาคุณภาพสูง

ด้วยเลนส์ CCIS และติดตั้งมาพร้อมโบรตฟวล์ด คาร์กฟวล์ด โพลาริซอร์ และคอนทราสต์เฟสลับ จึงเหมาะสมที่สุดกับการวิจัยและการผลิตโดส ปรับให้เข้ากับระบบ CASA และตัวเล็งทดสอบความชื้น

วัตถุประสงค์: เซลล์ 4 เท่า – 10 เท่า – 40 เท่า – 100 เท่า และ 10x เท่า

📦 40 x 20 x 40 cm / 8,6 kg

📦 40 x 58 x 26 cm / 10 kg



MASTER 7 กล้องจุลทรรศน์สามกระบอกตาขั้นสูง

ด้วยเลนส์ UCIS และติดตั้งมาพร้อมโบรตฟวล์ด คาร์กฟวล์ด โพลาริซอร์ และคอนทราสต์เฟสลับ

ปรับให้เข้ากับระบบ CASA และตัวเล็งทดสอบความชื้น

วัตถุประสงค์: เซลล์ 4 เท่า – 10 เท่า – 40 เท่า – 100 เท่า และ 10x เท่า

📦 30 x 25 x 40 cm / 6 kg

📦 50 x 50 x 30 cm / 8 kg



MASTER 5 กล้องจุลทรรศน์แบบสามกระบอกตา

สำหรับการวิเคราะห์น้ำเชื้อและการผลิตโดส

ตัวเล็งทดสอบแบบให้ความชื้น

วัตถุประสงค์: 4 เท่า – 10 เท่า – 40 เท่า – 100 เท่า

📦 30 x 25 x 40 cm / 6 kg

📦 50 x 50 x 30 cm / 8 kg



MASTER 3 กล้องจุลทรรศน์สองกระบอกตา

เหมาะกับการใช้มาเป็นประจำสำหรับอุปกรณ์ควบคุม การเคลื่อนไหวและคอนทราสต์ของน้ำเชื้อ

วัตถุประสงค์: 4 เท่า – 10 เท่า – 40 เท่า – 100 เท่า

📦 38 x 21 x 23 cm / 5 kg

📦 43 x 31 x 25 cm / 6 kg

NUCLEOCOUNTER

การนับจำนวนเซลล์



3 Kg
38 x 26 x 22 cm

กำหนดความเข้มข้นทั้งหมดและปอร์เซ็นต์ของควมมีชีวิตของน้ำอสุจิผ่านการเรืองแสง

- วิเคราะห์ความเข้มข้นของน้ำอสุจิใน 30 วินาที
- วิธีการวิเคราะห์โดยตรง
- การวิเคราะห์ที่ทำได้สูง
- ไม่จำเป็นต้องมีการสอบเทียบ
- จำเป็นต้องมีหลอดปริมาณต่ำ
- ไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษา


วัสดุสิ้นเปลืองที่จำเป็น:

- ตลับ (100 ชิ้น)
- รีจอนต์ (5 ลิตร)



น้ำมันสำหรับแช่

30 ml

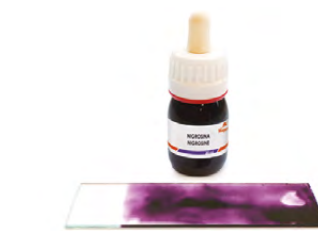

สีย้อม EOSIN-NIGROSIN


25 ml



ช่องนับเซลล์เบอร์เกอร์



ปิเปต

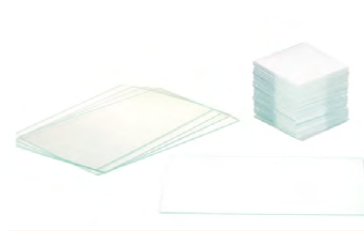

สไลด์และแผ่นปิด



ไมโครปิเปตและส่วนปลาย

สารละลายที่เจือจางน้ำเชื้อประสิทธิภาพสูง

Spermax, Duragen และ Vitasem




> Spermax, Duragen หรือ Vitasem ประสิทธิภาพสูงให้การปกป้องสูงสุดเพิ่มความสามารถในการปฏิสนธิสูงสุดของปริมาณน้ำเชื้อและมีส่วนช่วยในการผลิตสุรโนฟาร์มอย่างแน่นอน

“ ให้ผลการปฏิสนธิมากที่สุด ”

สร้างความแตกต่างในการควบคุมคุณภาพ

Magapor ดำเนินการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดที่สุดสำหรับสารละลายที่เจือจางน้ำเชื้อประสิทธิภาพสูง

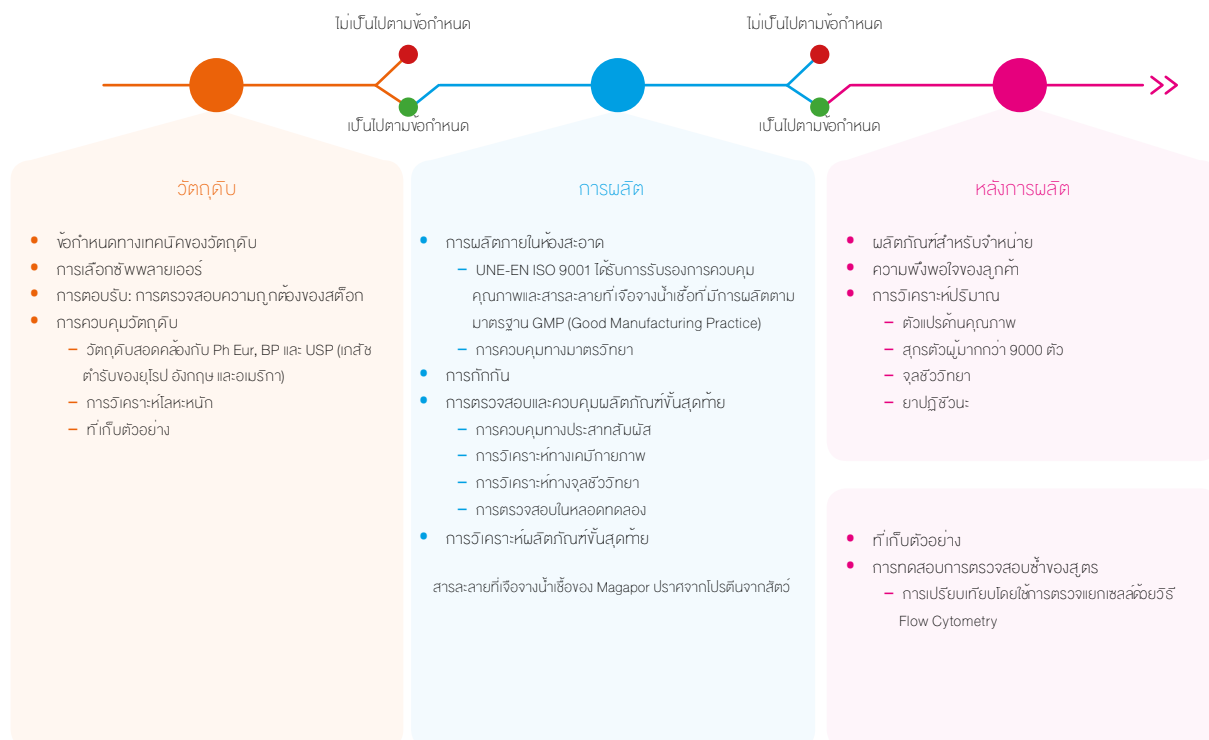

**ประสิทธิภาพสูงสุด
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่
ดีที่สุด**



SPERMAX

Spermax เป็นสารละลายที่เจือจางน้ำเชื้อรุ่นล่าสุดที่พัฒนาโดย Magapor

สูตรที่เป็นนวัตกรรมใหม่ประกอบด้วยสารต่อต้านอนุมูลอิสระ, ตัวป้องกันเยื่อเมมเบรนและสารตั้งต้นของพลังงานรุ่นล่าสุด

- รักษาการทำงานของไมโทคอนเดรียภายใต้สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการปฏิสนธิของอสุจิกับระบบสืบพันธุ์ของเพศเมีย
- ปกป้องตัวอสุจิระหว่างการเก็บรักษาและการขนส่ง รับประกันความมีชีวิตสูงสุดเมื่อปฏิสนธิ
- ให้พลังงานสูงสุดสำหรับตัวอสุจิและการป้องกันในระยะยาวสำหรับปริมาณน้ำเชื้ออสุจิ
- ปรับปรุงปฏิกริยาตัวอสุจิแบบครั้งเดียว

Spermax จะให้ความหมายเหมือนกับกับควาอบอุ่นใจระหว่างการจัดเก็บและการขนส่งในระยะทางไกลๆ, รับประกันผลลัพธ์ที่ดีที่สุด



DURAGEN

Duragen ให้การป้องกันปริมาณน้ำเชื้ออย่างมีนัยสำคัญเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

สูตรนี้เป็นการผสมผสานที่สมดุลระหว่างสารต่อต้านอนุมูลอิสระและสารป้องกันเยื่อเมมเบรนที่จะ:

- ให้การป้องกันเพิ่มเติมจากการเสื่อมสภาพของสเปิร์มเพราะกระบวนการออกซิเดชันของเยื่อเมมเบรนอสุจิ
- หลีกเลี่ยงการเก็บตัวอสุจิก่อนกำหนดในสถานการณ์ที่มีความต้องการมากที่สุด
- มักรู้สึกเหมือนแคเรียกักตัวน้ำเชื้อได้ไวได้ช้า จะได้รับการปกป้องมากขึ้น

Duragen ป้องกันความเครียดจากความร้อนที่อสุจิสามารถรับได้ เป็นสารละลายที่เจือจางน้ำเชื้อที่เหมาะสมสำหรับการผลิตน้ำเชื้อโดยการเจือจางในสองขั้นตอน



VITASEM

Vitasem เป็นสารละลายที่เจือจางน้ำเชื้อประสิทธิภาพสูงตัวแรกของเรา

แสดงถึงการก้าวกระโดดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เมื่อเทียบกับสารละลายที่เจือจางน้ำเชื้อระยะสั้นและระยะกลาง ความสำเร็จของ Vitasem ขึ้นอยู่กับสูตรซึ่ง:

- ปกป้องอสุจิจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
- มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระและสารป้องกันเยื่อเมมเบรน
- มีส่วนผสมของยาปฏิชีวนะที่กำกวมไม่ไวต่อตัว มีการรักษาน้ำเชื้อ

Vitasem ช่วยให้น้ำเชื้อในการเก็บรักษาปริมาณน้ำเชื้อที่ถูกต้อง



รูปแบบที่มีให้บริการ



ขนาดบรรจุภัณฑ์

	กล่องเล็ก	กล่องใหญ่
1 ลิตร	25 ซอง	6 กล่องเล็ก
5 ลิตร	-----	60 ซอง
100 ลิตร	-----	3 ซอง

	กล่องเล็ก	กล่องใหญ่
1 ลิตร	11 x 28 x 12 cm - 1,2 Kg	39.5 x 23.5 x 30 cm - 8 Kg
5 ลิตร	-----	39.5 x 23.5 x 30 cm - 14 Kg
100 ลิตร	-----	39.5 x 23.5 x 30 cm - 14 Kg



**HIGH
PERFORMANCE
EXTENDERS**

ค่า pH ที่เหมาะสม

6,9 - 7,5

เวลาการทำหีสติส

15 - 20 min

ความเข้มข้นของสารที่อยู่ในสารละลายที่เหมาะสมที่สุด

290 - 320 (mOsm/Kg)

BRIX

3,8 - 4,5

OPTIMIA และ BIOPIG

Magapor Extender สำหรับเก็บรักษาน้ำเชื้อ



OPTIMIA

สารละลายชีวภาพด้วยสูตรพิเศษเฉพาะของ Magapor เพื่อการเก็บรักษาน้ำเชื้อ สูตรนี้ช่วยเพิ่มความสามารถในการต้านเชื้อแบคทีเรียและควบคุมความจุและส่งผลให้ระดับความปลอดภัยเพิ่มขึ้นในปริมาณน้ำเชื้อที่ผลิต

ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานคุณภาพของ Magapor



BIOPIG

สารละลายที่เจือจางน้ำเชื้อ BTS ที่ได้รับการปรับปรุงพร้อมการป้องกันยาปฏิชีวนะในวงกว้าง

ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานคุณภาพของ Magapor

**OPTIMIA
BIOPIG**

ค่า pH ที่เหมาะสม	เวลาการทำไฮสเกีย	ความเข้มข้นของสารที่อยู่ในสารละลายที่เหมาะสมที่สุด	# BRIX
6,9 - 7,5	15 - 20 min	325 - 350 (mOsm/Kg)	4,2 - 4,9



รูปแบบที่ มี ให้บริการ

กล่องใหญ่	
1 ลิตร	200 ซอง
5 ลิตร	60 ซอง
100 ลิตร	3 ซอง



ขนาดบรรจุภัณฑ์

กล่องใหญ่	
1 ลิตร	39,5 x 23,5 x 30 cm - 10,5 Kg
5 ลิตร	39,5 x 23,5 x 30 cm - 15 Kg
100 ลิตร	39,5 x 23,5 x 30 cm - 14,5 Kg



DICOL

สารละลายที่เจือจางน้ำเชื้อสำหรับเก็บน้ำเชื้อ



โซลูชันที่มีประสิทธิภาพสำหรับการป้องกันและการต่อสู้กับการปนเปื้อน



Dicol เป็นสารละลายที่เจือจางน้ำเชื้อที่ไม่เหนียวเหนียวในช่องตลาด ซึ่งคิดค้นโดย Magapor เพื่อแก้ไขปัญหาการปนเปื้อน

ใช้เป็นสารละลายที่เจือจางน้ำเชื้อเพื่อการเก็บรวบรวมในระหว่างขั้นตอนการเก็บรวบรวมซึ่งรับประกันการฆ่าเชื้ออย่างรวดเร็วและควบคุมการปนเปื้อนของแบคทีเรียก่อนที่จะเจือจางขั้นสุดท้ายด้วยสารละลายที่เจือจางน้ำเชื้อ Magapor ตามปกติ



กล่องเล็ก: 10 x 28 x 12 cm 1,4 Kg
กล่องใหญ่: 39.5 x 23.5 x 30 cm 8 Kg




รูปแบบสำหรับ 1 สตร
25 ช่อง x 6 กล่องเล็ก



**PRACTICAL
INNOVATION**

สุกรพ่อพันธุ์ที่มีปัญหาการปนเปื้อนสามารถดำเนินการผลิตน้ำเชื้อต่อไปได้ด้วยผลผลิตที่ดีต่อฟาร์มเนื่องจากการใช้ DICOL

ค่า pH ที่เหมาะสม	เวลาการทำหีสติย	ความเข้มข้นของสารที่อยู่ในสารละลายที่เหมาะสมที่สุด	ความนำไฟฟ้าในสารละลาย	# BRIX
6,9 - 7,5	15 - 20 min	290 - 320 (mOsm/Kg)	8,5 - 11	3,8 - 4,5

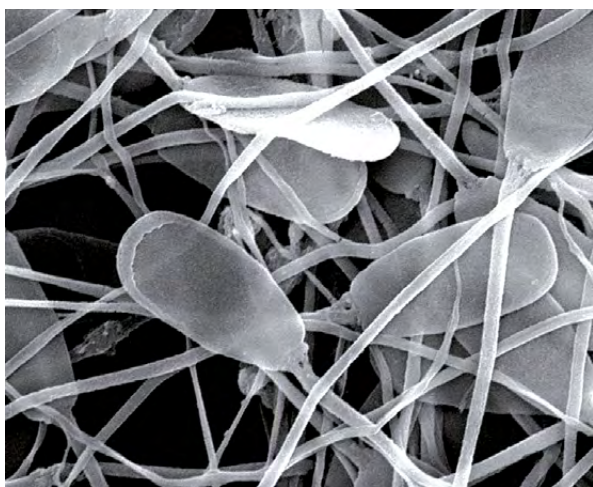

น้ำเชื้อที่ได้รับการดำเนินการด้วย Dicol



น้ำเชื้อที่ปนเปื้อน

EXTENDERBOX M2

อุปกรณ์สำหรับการเตรียมตัวขยายที่สร้างขึ้นใหม่โดยไม่ต้องมีระยะเวลา

ให้ปริมาณสารละลายที่เจือจางน้ำเชื้อที่ต้องการตามอุณหภูมิที่ต้องการ, ได้รับความคุ้มค่าใหม่อย่างแม่นยำและไม่ต้องรอเวลา

PRACTICAL INNOVATION



ระบบ
รายการของ
MAGAPOR

100 Kg
70 x 65 x 55 cm

120 Kg
80 x 60 x 90 cm

อุปกรณ์ในการเตรียมตัวขยายที่สร้างขึ้นใหม่ทันที และที่อุณหภูมิที่ต้องการโดยใช้น้ำของตัวขยายแบบเข้มข้น

ประกอบด้วยสองโมดูล ได้แก่ โมดูลหนึ่งเพื่อให้ความร้อนแก่ในทันทีและอีกโมดูลหนึ่งมีฮีตเตอร์สองที่ตัวควบคุมโดยเครื่องซึ่งความแม่นยำสูงสองเครื่องซึ่งจ่ายน้ำและตัวขยายเข้มข้นเพื่อให้ได้ตัวขยายที่สร้างขึ้นใหม่

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล:

- ความเร็วในการจ่ายสูง 240 ลิตร/ชม.
- ให้ความร้อนเฉพาะน้ำที่ต้องการในทันที

ความแม่นยำ:

- ปริมาณโดสที่แน่นอน (+/- 1 กรัม)
- เครื่องซึ่งความแม่นยำสูงสองเครื่อง
- ความแม่นยำในการจ่ายสูงเมื่อพิจารณาจากความหนาแน่นของตัวขยายแต่ละตัว

ความปลอดภัยและสูงอนามัย:

- วงจรแบบเปิดที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของน้ำ
- ทำจากสแตนเลสและไฟเบอร์กลาส

ลักษณะเฉพาะทางเทคนิค



230 V - 50-60 Hz - 2000w
การไหลสูงสุด 4 L/min
ความจุเครื่องซึ่งสูงสุด 20 Kg
ความละเอียด +/- 2gr

เพราะเหตุใดจึงต้องใช้ตัวขยายแบบเข้มข้น

- คุณจะได้รับความเฉพาะตัวขยายที่สร้างขึ้นใหม่ที่คุณต้องการ
- คุณสามารถบันทึกตัวขยายความเข้มข้นที่ไม่ได้ใช้
- การเตรียมการเร็วขึ้นมาก
- ระบบช่วยเหลือสำหรับการเตรียมตัวขยายความเข้มข้น

EXTENDERBOX

อุปกรณ์สำหรับเตรียมสารละลายที่เจือจางน้ำเชื้อที่
สร้างขึ้นใหม่

 **PRACTICAL**
INNOVATION



CE

 ระบบ
รอกำการของ
MAGAPOR

 100 Kg
70 x 65 x 55 cm

 120 Kg
80 x 60 x 90 cm

ประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ:

- ให้ความร้อนเฉพาะน้ำที่จำเป็น
- การไหลของน้ำและสารละลายที่เจือจางน้ำเชื้อ
อย่างต่อเนื่อง
- สารละลายที่เจือจางน้ำเชื้อพร้อมการไหลที่ 90
 ลิตร/ชั่วโมง

ความแม่นยำ:

- ปริมาณที่แน่นอน (+/- 1gr)

ความปลอดภัยและถูกสุขอนามัย:

- ระบบปิดช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการปน
เปื้อนของน้ำ

ลักษณะเฉพาะทางเทคนิค



230 V - 50-60 Hz - 2500w
การไหลสูงสุด 1.5 L/min
ความจุเครื่อง 12 Kg
ความละเอียด +/- 1gr



NEXTEN 300

ออสโมซิส, การเจือจางและอุปกรณ์จ่ายสำหรับเครื่องอัตโนมัติที่สร้างขึ้นใหม่

กระบวนการเจือจาง
ทั้งหมดในอุปกรณ์
เดียว

PRACTICAL
INNOVATION



> จัดการกระบวนการผลิตของสารละลายที่เจือจางน้ำเชื้อที่สร้างขึ้นใหม่อย่างสมบูรณ์ตั้งแต่การออสโมซิสของน้ำไปจนถึงการจ่ายของสารละลายที่เจือจางน้ำเชื้ออย่างแม่นยำ, ควบคุมการนำไฟฟ้าและอุณหภูมิ

คุณสมบัติ:

- ทำความสะอาดอุปกรณ์อัตโนมัติ

ความเร็ว:

- เตรียมการเจือจางได้ 60 ลิตรทุกๆ 10 นาที

การเชื่อมต่อ:

- สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลสำหรับการทำงานระยะไกลหรือในแหล่งกำเนิด

Nexten 300 มาพร้อมกับ:

- อุปกรณ์ออสโมซิสผันกลับ (Reverse osmosis)
- ถังน้ำ (300 ลิตร).
- เครื่องทำความร้อนแบบไหลต่อเนื่อง
- ถังเจือจาง (60 ลิตร)
- เครื่องสำหรับตรวจ (การนำไฟฟ้าและอุณหภูมิของน้ำ)
- หลอดอัลตราไวโอเลต 3 หลอด



E-DISPENSER

อุปกรณ์เก็บน้ำเชื้อที่มีความแม่นยำสูงสุด



> ให้ปริมาณที่ต้องการด้วยความเร็วสูงและแม่นยำมากคือเป็นสับจ่ายของเหลวแบบรีดกึ่งอัตโนมัติการไหลสูงในหัวและสเกลที่มีความแม่นยำ

การเชื่อมต่อ

สามารถป้อนข้อมูลงานผ่าน:

- หน้าจอสัมผัส
- คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อผ่านอีเธอร์เน็ต การส่งคำสั่งงานผ่าน Gesipor 360
- การอ่านบาร์โค้ด



ระบบ
รายการของ
MAGAPOR

29 Kg
40 x 37 x 29 cm

32 Kg
60 x 42 x 52 cm

ลักษณะเฉพาะทางเทคนิค



50/60 Hz | 250W | 110/230 V

การไหลที่ กำหนด/สูงสุด 10
ลิตร/นาที (น้ำกลั่น)

ความจุและความละเอียดสูงสุด
ของเครื่อง 20 kg +/- 2gr

EASYDIL

ถังสำหรับเตรียมสารละลายที่เจือจางน้ำเชื้อที่สร้างขึ้นใหม่



> อุปกรณ์ที่ออกแบบมาสำหรับการอุ่นและผสมสารละลายที่เจือจางน้ำเชื้อได้ถึง 100 ลิตร

- สร้างจากสเตนเลสทั้งหมด
- มีเครื่องควบคุมแม่เหล็ก
- ตัวควบคุมอุณหภูมิชนิด PID สำหรับการควบคุมที่แม่นยำโดยมีความผิดพลาดที่คลาดเคลื่อนน้อยกว่า +/- 0,5°
- ช่องใส่ฟอยล์สำหรับเติบและเทของเหลว
- สั่นเปสียงพลังงานไฟฟ้าต่ำ



50 Kg
Ø 58 x h 70 cm

60 Kg
60 x 80 x 93 cm

ลักษณะเฉพาะทางเทคนิค



230 V | 50/60 Hz

กำลังไฟ 750W

ความแม่นยำ +/- 0,5°C

ความเร็วของเครื่อง 0-400 rpm

เวลาอุ่นเครื่อง 100 ลิตร 3-4 ชม

OSMO6

อุปกรณ์ออสโมซิสผันกลับ (Reverse osmosis)

อุปกรณ์ที่ผลิตจากสแตนเลสประเภท II (ASTM) โดยใช้ น้ำดื่มจากแหล่งจ่ายน้ำสาธารณะ:

- ติดตั้งเป็นระบบอุปกรณ์ออสโมซิสผันกลับ (จาก 240 ลิตร/วัน)
- ตัวเครื่องประกอบได้ง่ายเพื่อการเข้าถึงตัวกรองและการเปลี่ยนที่สะดวกง่ายดาย
- การอ่านค่าการนำไฟฟ้าทันที 3 จุด
- การเชื่อมต่อผ่านพอร์ตอนุกรม RS232
- ตั้งสเกลสเปกโตรมิเตอร์เซ็นเซอร์ระดับและหลอดอัลตราไวโอเลตตั้งแต่ 100 สตรีม (เป็นอุปกรณ์เสริม)
- การติดตามตรวจสอบการผลิตผ่านแอป Magapor



15 Kg
52 x 30 x 50 cm



17 Kg
34 x 60 x 60 cm



OSMO6 ใช้ชุดตัวกรองและชิ้นส่วนที่ต้องเปลี่ยนเป็น
ประจำเพื่อให้ได้น้ำที่บริสุทธิ์ได้คุณภาพสูงสุด:

- ดิสก์ปรับสภาพน้ำกับมันแบบเบ็ด
- ดิสก์เรซิน
- ดิสก์อะโนไดซ์
- เยื่อเมมเบรนออสโมซิสผันกลับ

ความต้านทานของน้ำบริสุทธิ์ที่ผลิตได้คือ $\geq 5 \text{ M}\Omega\cdot\text{cm}$ ที่ 25°C

น้ำที่ผลิตได้มีคุณสมบัติตรงหรือเกินกว่ามาตรฐาน ASTM, CAP, CLSI and ISO 3696/BS 3997

BM 20

อ่างน้ำ

อ่างน้ำอุณหภูมิเพื่อรักษาอุณหภูมิให้คงที่ของตัวอย่างการหลัง
และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ

- ทำจากสแตนเลสทั้งหมดเพื่อสุขอนามัยและความทนทานที่
ดียิ่งขึ้น
- ความจุขนาด 20 ลิตร
- การควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิทัลพร้อมตัวควบคุมความ
แม่นยำสูงแม่นยำถึง 0.1°C
- ช่วงอุณหภูมิ $25-40^\circ\text{C}$.



12 Kg
55 x 38 x 22 cm



13 Kg
60 x 40 x 28 cm



เตาอบฆ่าเชื้อ
รุ่นต่างๆ

80 - 140 l



เครื่องทอนแม่เหล็ก
แบบให้ความร้อน



น้ำกลั่น
น้ำกลั่นประเภทที่ 2

5L
4 x กล้อง



สีย้อม
สำหรับการทำเครื่องหมายปริมาณ

20 ml



ขวดโหลและกระป๋อง
สำหรับ 3 และ 5 ลิตร



SAVOGERM
สบู่ที่มีค่า pH เป็นกลาง

5L
4 x กล้อง



ถุงมือ
ถุงมือไนล่อนหรือยางลาเท็กซ์แบบใช้แล้วทิ้ง



กระป๋อง 100 ลิตร
ถุงพลาสติกใช้แล้วทิ้ง 100 ลิตร

BAGMATIC N40

บรรจุภัณฑ์อัตโนมัติและการติดฉลากปริมาณน้ำเชื้อ 1200 ชิ้น / ชั่วโมง



> ความเร็วและความแม่นยำสูงสุดในบรรจุภัณฑ์:

- แพ็ก 1200 ชิ้น/ชั่วโมง
- ความแม่นยำในการจ่ายยาสูง +/- 1 กรัม

ซอฟต์แวร์และการเชื่อมต่อ:

- ฟังก์ชันตรวจสอบอัตโนมัติเพื่อการวินิจฉัยเหตุการณ์อย่างรวดเร็ว
- สามารถทำงานได้อย่างอิสระจากพีซี

ใช้งานง่ายยิ่งขึ้น:

- หน้าจอสัมผัสความละเอียดสูงขนาดใหญ่ 10 นิ้ว และฮาร์ดแวร์ที่ใช้งานง่าย
- ระบบไฟส่องสว่างเพื่อบอกข้อมูลที่สำคัญและเห็นภาพสถานะอุปกรณ์
- ทำงานร่วมกับระดับเสียงต่ำ

แข็งแรง กระชับ และทำความสะอาดง่าย:

- สร้างจากสแตนเลสและไฟเบอร์กลาส
- เครื่องติดฉลากอยู่ในอุปกรณ์ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านประตูที่ถอดออกได้ช่วยป้องกันการกระเด็น

ใช้งานและบำรุงรักษาง่าย:

- กลไกการบำรุงรักษาต่ำ
- ติดตั้งเครื่องตรวจจับถุงและของเหลว
- ระบบหมุนเกลียวที่ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น
- ใช้ถุงแรกและถุงสุดท้ายในมือ
- เพลอนซ์เบ็ดคงที่ในตัว



82 Kg
140 x 92 x 50 cm

95 Kg
60 x 80 x 120 cm

ลักษณะเฉพาะทางเทคนิค



110/230 V - 50/60 Hz - 200 W
แรงดันนิวแมติก 6-8 บาร์

ใช้งานได้ทั้งถุงน้ำเชื้อ (ไม่เกิน 90 มล.) และถุงเล็ก (สูงสุด 45 มล.)

BAGMATIC

บรรจุภัณฑ์อัตโนมัติและติดฉลากปริมาณน้ำเชื้อ
950 หน่วย/ชั่วโมง

รวดเร็วยิ่งขึ้น, หลากหลาย
มากขึ้น, ใช้งานง่ายมากขึ้น



> บรรจุภัณฑ์ที่รวดเร็วและแม่นยำ:

- บรรจุได้ 950 หน่วย/ชม.
- ความแม่นยำในปริมาณน้ำเชื้อ +/- 1 กรัมในกรณีที่ใช้ตราชี้ข้าง

ซอฟต์แวร์และการเชื่อมต่อ:

- ฟังก์ชันตรวจสอบอัตโนมัติสำหรับการวินิจฉัยเหตุการณ์อย่างรวดเร็ว
- สามารถทำงานได้อย่างอิสระจากคอมพิวเตอร์

ทำความสะดวกง่าย:

- สร้างจากสแตนเลสสตีลและอลูมิเนียมโมโนโคซ์
- เครื่องติดฉลากอยู่ภายในอุปกรณ์ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านภาคแบบถอดได้ซึ่งป้องกันการกระเซ็น

การดูแลบำรุงรักษาได้ง่าย:

- กลไกการบำรุงรักษาต่ำ
- ติดตั้งเครื่องตรวจจับกระเป๋

- ใช้ทั้งถุงใบแรกและถุงใบสุดท้ายในมัน

ใช้กับได้ทั้งถุงน้ำเชื้อ (ไม่เกิน 90 มล.) และถุงเล็ก (สูงสุด 45 มล.)



ระบบ
ขนาดการของ
MAGAPOR

85 Kg
135 x 75 x 50 cm

97 Kg
60 x 80 x 93 cm

ลักษณะเฉพาะทางเทคนิค



110/230 V - 50/60 Hz - 200 W
แรงดันนี้ วแมตัก 6-8 บาร์



SIMPLYMATIC

บรรจุภัณฑ์อัตโนมัติและติดฉลากปริมาณน้ำเชื้อ 900 หน่วย/ชั่วโมง

โซลูชันที่เรียบง่ายและใช้งาน
ง่ายสำหรับกระบวนการบรรจุ
หีบห่อโดยอัตโนมัติ

PRACTICAL
INNOVATION



CE

50 Kg
120 x 65 x 35 cm

64 Kg
60 x 80 x 93 cm

> รวดเร็ว, สะดวกและทนทาน:

- โครงสร้างที่แข็งแรงทนทานด้วยส่วนประกอบของอลูมิเนียมและสแตนเลสสตีล
- โครงสร้างที่แข็งแรงทนทานในโปรไฟล์อลูมิเนียมและสแตนเลสสตีล



ลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

110/230 V - 50/60 Hz - 180 W
แรงดันไฟฟ้าแมตีก 6-8 บาร์
มีขนาด 1250 กรัม

SIMPLYBAG

บรรจุภัณฑ์ที่เรียบง่ายของน้ำเชื้อ



CE

5 Kg
95 x 20 x 32 cm

6 Kg
50 x 40 x 16 cm

- ปิดผนึกโดยใช้ที่หนีบด้วยมือ
- รองรับการใช้น้ำเชื้อสำหรับถุงเก็บน้ำเชื้อ 6 ถุงและฉนวนถุงเก็บน้ำเชื้อ
- โครงสร้างเป็นอลูมิเนียม

SEMENBAG และ SMALLBAG

ภาชนะบรรจุที่มี
RTC

ถุงบรรจุน้ำเชื้อที่มีการควบคุมความเป็นพิษต่อการเกิดซ้ำ (RTC)



> ด้วยผลิตภายใต้การควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดที่สุด ทำให้ Semenbag และ Smallbag เก็บรักษาน้ำเชื้อไว้นานได้สัปดาห์ที่สุด บรรจุภัณฑ์และรูปแบบที่พัฒนามาขึ้นเพื่อ

ความสะดวกสบายของสุกรพ่อพันธุ์

- ถุงน้ำเชื้อ Semenbags และ Smallbags อัตโนมัติบรรจุเนื้อละ 1250 ชิ้นช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการเปลี่ยนเนื้อ

- บรรจุภัณฑ์ทำภายนอกออกแบบมาเพื่อประหยัดพื้นที่และใช้งานได้จริงมากขึ้นเมื่อเปลี่ยนเนื้อ



SEMENBAG อัตโนมัติ

1 ม้วน x 1250 หน่วย 6,5 Kg 41 x 41 x 30 cm



SMALLBAG อัตโนมัติ

1 ม้วน x 1250 หน่วย 6,5 Kg 41 x 41 x 30 cm



SEMENBAG ทำด้วยมือ

พรีคัท

3 ม้วน x 500 หน่วย 9,3 Kg 60 x 40 x 28 cm



RTC

การควบคุมความเป็นพิษต่อการสืบพันธุ์



RTC เป็นชุดเครื่องมือควบคุมคุณภาพที่ Magapor ดำเนินการในระดับเคมีและชีวภาพ โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยซาราโกซา, บบบรรจุกัมมันต์เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ "ปลอดภัยสำหรับการสืบพันธุ์"

กระบวนการที่เข้มงวดมีขั้นตอนผลิตภัณฑ์ที่ควบคุมการมีอยู่ของ Phthalates, Bisphenol A, Badge, Cyclic lactone และ Nonylphenol ซึ่งอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยวิธีการเคลื่อนย้ายปริมาณน้ำเชื้อ

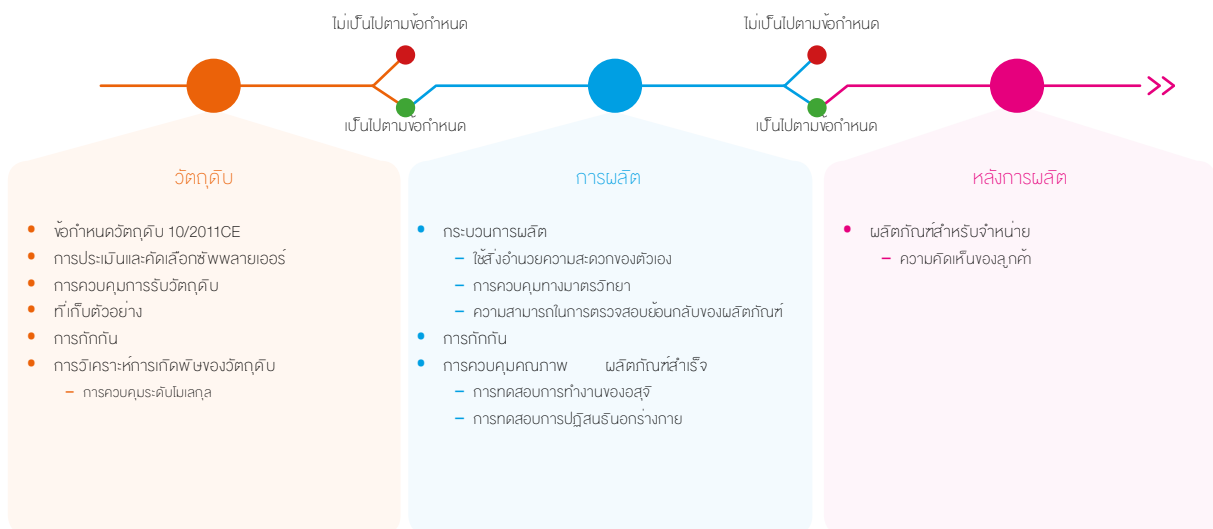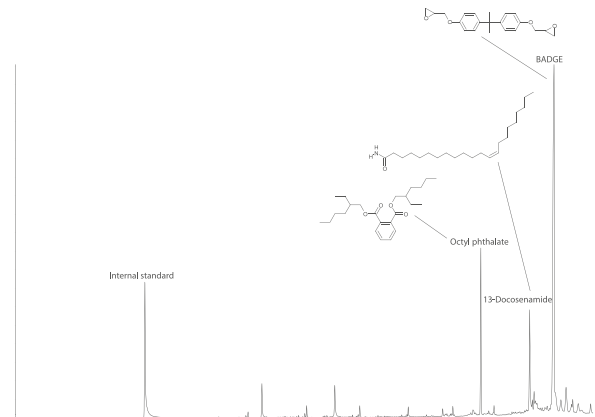

T-SEM

การควบคุมอุณหภูมิแบบเรียลไทม์



105 x 65,5 x 19 mm



อุปกรณ์สำหรับตรวจสอบบันทึกและประมวลผลอุณหภูมิของห้องปริมาณและสั่งงานควบคุมความเสถียร

- ระบบเตือนภัยด้วยการส่งอีเมล เมื่ออุณหภูมิของอุปกรณ์อยู่นอกช่วงที่กำหนด และเมื่อสถานะแบตเตอรี่เหลือน้อย
- อนุญาตให้แสดงประวัติอุณหภูมิทั้งหมด
- การเชื่อมต่อผ่านการดาวน์โหลดมือถือ NB-IoT
- แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ยาวนาน

แอป MAGAPOR

ด้วยแอป Magapor คุณสามารถ

- ดำเนินการกำหนดค่าอุปกรณ์ทั้งหมดด้วยวิธีที่รวดเร็ว ง่ายและยืดหยุ่น
- ปรึกษา กรอง ซิงโครไนซ์ และดาวน์โหลดข้อมูลบันทึกอุณหภูมิทั้งหมด
- อนุญาตให้เข้าถึงผู้ให้หลายคน
- กำหนดค่าที่อยู่อีเมลสำหรับการเตือน
- ส่งออกข้อมูลจากอุปกรณ์ของคุณในรูปแบบ PDF หรือ Excel

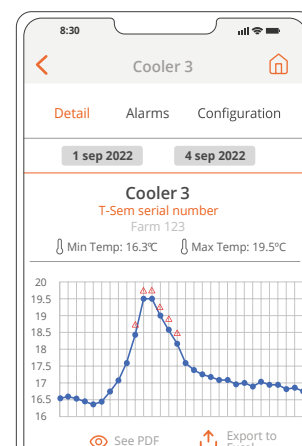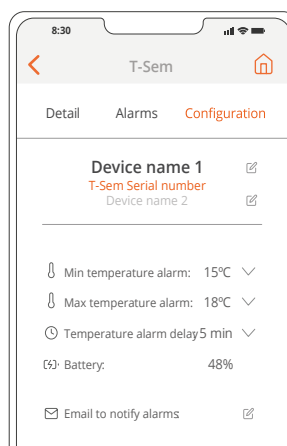

กุลเลอร์สำหรับน้ำเชื้อ

อุปกรณ์ในการเก็บรักษาน้ำเชื้อเพื่อหลีกเลี่ยงการช็อกจากความร้อนและรักษาน้ำเชื้อให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม

- การควบคุมอุณหภูมิด้วยโซนที่เป็นกลางซึ่งช่วยลดการใช้พลังงาน และยืดอายุการไข่นของคอมพิวเตอร์
- การหมุนเวียนอากาศเพื่ออุณหภูมิที่สมดุลอย่างสมบูรณ์แบบ
- เทอร์โมสตัทพร้อมสัญญาณเตือน
- ความละเอียดอุณหภูมิ 0.1°C. อุณหภูมิภายในช่วง 15-40°C



Z-100

- ปริมาณที่กำหนด: 130 ลิตร
- ปริมาณ Semenbag ที่เหมาะสมที่สุด 280
- กำลังไฟ: 65 วัตต์

CE 29 Kg 55 x 60 x 84 cm 31 Kg 57 x 60 x 88 cm

Z-300

- ปริมาณที่กำหนด: 241 ลิตร
- ปริมาณ Semenbag ที่เหมาะสมที่สุด 520
- กำลังไฟ: 200 วัตต์

CE 48 Kg 56 x 62 x 125 cm 51 Kg 60 x 68 x 140 cm

Z-450

- ปริมาณที่กำหนด: 344 ลิตร
- ปริมาณ Semenbag ที่เหมาะสมที่สุด 680
- กำลังไฟ: 270 วัตต์

CE 70 Kg 60 x 74 x 185 cm 72 Kg 72 x 76 x 190 cm

COOL BOX

NT-30

- ความร้อนและความเย็นเทอร์โมอิเล็กทริกของเซเลเนียม
- ตัวควบคุมดิจิตอลที่มีความละเอียด 0.1°C
- โซนที่เป็นกลางในตัวซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานของกล่องและยืดอายุการใช้งาน
- องค์ประกอบการระบายความร้อนที่ปราศจากสาร CFC
- กำลังไฟ: 75 / 65-80 วัตต์
- กระแสไฟฟ้า 220 VAC/12-24 โวลต์กระแสตรง
- ความถี่ 50/60 เฮิรตซ์
- การใช้พลังงานไฟฟ้า 4 แอมแปร์
- ปริมาณที่กำหนด: 34 L
- ปริมาณ Semenbag ที่เหมาะสมที่สุด 120



NT-110

- ทำความร้อนและระบายความร้อนด้วยวงจรอัดแก๊ส
- ตัวควบคุมดิจิตอลที่มีความละเอียด 0.1°C
- โซนที่เป็นกลางในตัวซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานของกล่องและยืดอายุการใช้งาน
- องค์ประกอบการระบายความร้อนที่ปราศจากสาร CFC
- กำลังไฟ: 220/75 วัตต์
- กระแสไฟฟ้า 100-240 VAC/12-24 โวลต์กระแสตรง
- ความถี่ 50/60 เฮิรตซ์
- การใช้พลังงานไฟฟ้า 10 แอมแปร์
- ปริมาณที่กำหนด: 95 ลิตร
- ปริมาณ Semenbag ที่เหมาะสมที่สุด 435



DATALOGGER USB

การอ่านและการจัดเก็บอุณหภูมิ

DATAPAD

สำหรับการอ่านและกำหนดค่าโดยตรง



สายสวณไฟฟ้
มี/ไมม่ืออะคเพตอร์

มีอะคเพตอร์ 800 หน่วย/กล่อง
ไม่มีอะคเพตอร์ 1000 หน่วย/กล่อง
11 Kg
40 x 60 x 46 cm



สายสวณไฟฟ้เคลือบ

500 หน่วย/กล่อง
7 Kg
40 x 60 x 26 cm



สายสวณเกลียวสีเหลือง

1000 หน่วย/กล่อง
18 Kg
40 x 60 x 46 cm



สายสวณเกลียวสีส้ม

1000 หน่วย/กล่อง
20 Kg
40 x 60 x 46 cm



iGREEN®
ecocatheter

สายสวณ iGREEN
Ecocatheter

สายสวณแบบแรกที่มีท่อแบบย้อยสลาย
ได้สำหรับการพบบทกษณสุด

**PRACTICAL
INNOVATION**

500 หน่วย/กล่อง
6 Kg
40 x 80 x 35 cm

สายสวนสำหรับการพสมเทียมหลังคลอดลูก

ประสบการณ์มากกว่า 20 ปีที่ทำงานด้านการพสมเทียมหลังคลอดลูก



MAGA*S




MAGAPLUS S

- ออกแบบและควบคุมยัดหย่นเพื่อการพสมเทียมที่ทำได้ง่ายและไม่เป็นอันตรายต่อแม่สุกร



MAGA*

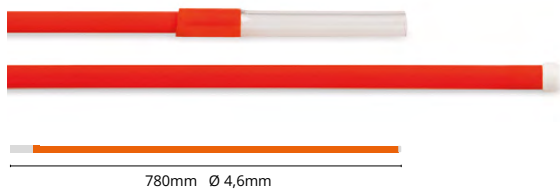


MAGAPLUS

- ไม่จำเป็นต้องใช้สายสวนนำทาง



MAGA*N

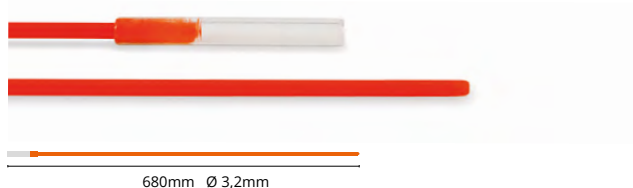


MAGAPLUS N

- ความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางเฉพาะสำหรับแม่สุกรที่ไม้ตั้งครรภ์



MAGA*DD

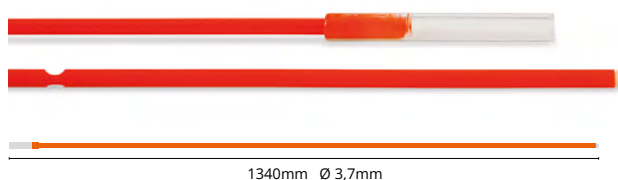

MAGAPLUS DD

- การตรวจสอบการสะสางครั้งสำหรับการพสมเทียมภายในมดลูกส่วนลึก



MAGASCAN

เครื่องอัลตราซาวด์ Wi-Fi

- ความลึก: ปรับได้ 100-180 มม.
- ส่งไปยังอุปกรณ์มือถือ (แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน)
- การวัดระยะทางพื้นที่และสูตรศาสตร์
- เครื่องมือตรวจสอบและเก็บเลือดกันน้ำ
- ให้ภาพมีคุณภาพสูง
- พร้อมขนาด 8 นิ้วและฝาครอบป้องกัน
- พร้อมกระเป๋าพกพา



2,7 Kg
45 x 40 x 12 cm



3 Kg
50 x 40 x 15 cm



FAT SCAN

เครื่องสแกนไขมันด้านหลัง

- วัดความหนาเป็นมิลลิเมตรและชั้นไขมันหลังด้วยอัลตราซาวด์
- ช่วงการวัด: 4 ถึง 40 มม.
- แสดงผลในโหมด M
- ระยะเวลาทำงานยาวนานถึง 22 ชั่วโมง
- ครอบคลุมสลับเทียบและกระเป๋าคือ



2,1 Kg
35 x 36 x 22 cm



RACCORD CATHETER

สำหรับการผสมเทียมอัตโนมัติ

- ความยาว 490 มม.



1000 หน่วย/กล่อง



HIGIPAL

น้ำเช็ดทำความสะอาด



150 ซีม/ท่อ
24 ท่อ/กล่อง



1,000 ซีม/หลอด



AI GEL

เจลหล่อลื่น



5 ลิตร
4 หน่วย/กล่อง



เจลอัลตราซาวด์

พร้อมเครื่องจ่าย



5 ลิตร
4 หน่วย/กล่อง

BLUE LINE

การแก้ปัญหาทางธรรมชาติแนวใหม่



ESPERMAPLUS

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับหมูป่าตัวผู้โดยเฉพาะ

ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าสารอาหารรอง วิตามิน และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อการเพิ่มการผลิตน้ำอสุจิในหมูป่าตัวผู้

25 kg
กระสอบขนาด 40 x 12 x 70 / 25 kg

5 กระสอบ กระสอบละ 1 กก. ต่อ
กล่อง 30 x 21 x 22 / 5,3 kg



PHEROBOAR

ฟีโรโมนหมูป่าตัวผู้

ชุดฟีโรโมนสังเคราะห์สำหรับการตรวจจับและการจัดการในช่วงรอบการเป็นสัดในแม่สุกร ซึ่งช่วยปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์และลดวันที่ไม่ก่อให้เกิดผลผลิตด้วยสัญญาณเงินเพื่อทำความเข้าใจแม่สุกรที่ผ่านการบำบัดแล้ว

ขวด 100 มล. (การใช้ 300 ครั้ง)

ขวด 100 มล. (การใช้ 300 ครั้ง)
15 x 7,5 x 17,5 cm



VITALPIG

อาหารเสริมพลังงานสำหรับลูกสุกร

ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำนมเหลืองตั้งแต่ช่วงแรกของชีวิต ซึ่งเป็นการลดอัตราการตายก่อนหย่านม ประกอบด้วยวิตามินพลังงาน วิตามิน และตัวกระตุ้นการเผาผลาญที่ดูดซับได้สูง ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับลูกสุกรที่กำลังอ่อนแอและเครียด

ขวด 250 มล.

แพ็คเกจ 6 ขวด
1,7 kg / 19 x 13 x 14 cm



HYDROMAX

ผงคันความชุ่มชื้นในช่องปาก

สารคันความชุ่มชื้นที่ละลายน้ำได้โดยไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ สูตรที่มีสารสกัดจากพืช เหมาะสำหรับบำรุง ซดเชยน้ำ และรักษาปัญหาเกี่ยวกับลำไส้ได้ มีการระบุไว้ให้เฉพาะลูกสุกรหย่านมแล้วเท่านั้น

ซอง 1 กก.

แอป MAGAPOR

ฐานความรู้ได้รับการอัปเดตตามเวลาจริงสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะพันธุ์สุกร



ตัวแปล

คุณสามารถเปรียบเทียบตัวแปลคุณภาพน้ำเชื้อหลักของสุกรพ่อพันธุ์ของ
คุณกับฐานข้อมูลของสุกรตัวเมียมากกว่า 9000 ตัวที่อัปเดตแบบเรียลไทม์



แบบสอบถามความคิดเห็น

ปรึกษาและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการสืบพันธุ์ของสุกรที่
แตกต่างกันโดยเปรียบเทียบกับคำตอบจากช่วงเวลาก่อนหน้านี้เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงของแนวโน้มและวิธีการทำงานที่แตกต่างกันทั่วโลก



การเผยแพร่สิ่งพิมพ์

เข้าถึงห้องสมุดของสื่อสิ่งพิมพ์ทางเทคนิคในหัวข้อที่เกี่ยวข้องมาก
ที่สุดที่มีผลต่อการสืบพันธุ์ของสุกรซึ่งมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลา

และอื่น ๆ อีกมากมาย ...

เข้าถึงรายงานการตรวจสอบแบบช่วง Extender ได้ทันที,
ข่าวสาร, ภาพถ่าย ... และทั้งหมดนี้มีใน 18 ภาษา!



ดาวน์โหลดได้บนนี้จาก
App Store



ดาวน์โหลดได้บนนี้จาก
Google Play





Magapor S.L.

www.magapor.com

